

KaWe MASTERLIGHT®

PRAXISLEUCHTEN | MEDICAL EXAMINATION LIGHTS



Licht aus – Spot an! Klare Sicht mit Praxisleuchten.

Praxisleuchten sind unverzichtbar, wenn Sie Gewebestrukturen untersuchen wollen. Sie können mit ihnen nicht nur das Untersuchungsfeld genau analysieren und so effektiv zu einer schlüssigen Diagnose kommen. Praxisleuchten schaffen auch eine optimale Sicht für Ihre Behandlung, sei es im operativen oder nicht operativen Bereich.

Damit sind Praxisleuchten mehr als nur Lichtgeber zur klassischen Raumausleuchtung. Sie sind kleine Hochleistungsgeräte der Medizintechnik: Eine natürliche Farbwiedergabe, zielgenaues Ausleuchten des Sichtfeldes und die leichte Positionierung des Leuchtkörpers sind unabdingbare Anforderungen. Ein modernes Design, eine einfache Handhabung und die unkomplizierte Reinigung/Desinfektion des Gerätes komplettieren den heutigen Standard.

Die KaWe MASTERLIGHT® Leuchten sind schon seit Jahren fester Bestandteil des KaWe-Portfolios. Mit den Praxisleuchten aus der KaWe MASTERLIGHT® Serie arbeiten Sie wie unter Tageslichtbedingungen. Der Leuchtkörper lässt sich präzise fokussieren. Mit der Helligkeitsregulierung passt er sich flexibel an die gegebene Lichtsituation an. Auch kleinste Farbnuancen im Gewebe werden dargestellt und schärfen den Blick für eine klare Diagnose und sichere Behandlung.

Neben der erfolgreichen Halogen-Ausführung sind die KaWe MASTERLIGHT® Leuchten ebenfalls mit der zukunftsweisenden LED-Beleuchtungstechnologie erhältlich. Sie bieten neben den genannten Vorteilen der Halogen-Lichttechnik ein infrarotfreies kühles, kontrastreiches Licht und eine hohe Lebensdauer.

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir zwei weitere LED Praxisleuchten: KaWe MASTERLIGHT® 10 LED und 15 LED in unser umfangreiches Sortiment aufgenommen.

Lights out – Spotlight on! See clearly with medical examination lights.

Medical examination lights are indispensable when examining tissue structure. With these lights, you are able to analyze the examination area exactly and therefore effectively make a concrete diagnosis. Medical examination lights provide you with optimal visibility while treating your patients, be it during an operation or otherwise.

Medical examination lights are more than just the classic lamps that are used to brighten a room. They are small high-power medical instruments with absolute requirements: natural colour rendering, precise illumination of the desired area and the ability to be moved to the correct position easily. In addition, these devices' modern design, simple operation and easy cleaning/disinfection round out their conformance to the current state-of-the-art standard.

KaWe MASTERLIGHT® lamps have been an important part of KaWe's product line for years. Working with a KaWe MASTERLIGHT® medical examination lamp is like working in full daylight. The light can be focused precisely. With the brightness adjustment switch, the lamp can be adapted to any needed lighting situation. Even the smallest colour nuances in the tissue can be seen thus making it easier to make a precise diagnosis and perform safe treatment.

In addition to our well-received halogen models, our KaWe MASTERLIGHT® lamps are also available with visionary LED illumination technology. They offer, in addition to the named advantages of halogen light technology, infrared-free, cool, high-contrast light and a long working life.

Due to popular demand, we have added two more LED medical examination lights to our product line: KaWe MASTERLIGHT® 10 LED and 15 LED.

KaWe MASTERLIGHT® Classic

PRAXISLEUCHTEN MIT SCHWANENHALS | GOOSENECK EXAMINATION LIGHTS

KaWe MASTERLIGHT® Classic Praxisleuchte mit Schwanenhals Gooseneck examination light

Flexible Halogenpraxisleuchte
mit 5-Fuß-Fahrstativ aus hochwertigem Edelstahl
Flexible halogen examination light with 5-foot,
rolling floor stand made of high-quality stainless steel

- modernes, schlankes Design
- punktgenaues Licht
- angenehm und wunschgemäß verstellbar
- Netzspannung 230 Volt
- Lampe 12 V/35 Watt mit Halogen-Kaltlichtreflektor
- Abstrahlungswinkel 8°
- Farbtemperatur ca. 3200° Kelvin
- einfache und schnelle Montage
- modern, slim design
- precise light spot
- easy to use, infinitely adjustable
- supply voltage: 230 Volt
- lamp: 12 V/35 Watts, with halogen cold light reflector
- reflection angle: 8°
- colour temperature: approx. 3200° Kelvin
- easy and quick assembly

REF 10.11010.002

mit 5-Fuß-Fahrstativ JEDOCH mit
Stecker mit 3 Rechteckstiften
with 5-foot, rolling floor stand, HOWEVER
with power plug, with 3 rectangular pins



240 V
GB
VERSION

REF 10.11011.002


Technische Daten | Technical data

Leuchtfeldgröße (bei 0,5 m Arbeitsabstand) Light spot size (at a working distance of 0.5 m)	100 mm
Arbeitsbereich (bei 0,5 m Arbeitsabstand) Working area (at a working distance of 0.5 m)	125 mm
Beleuchtungsstärke (bei 0,4 m Arbeitsabstand) Illumination intensity (at a working distance of 0.4 m)	44.000 Lux
Maximale Höhe Maximum height	211 cm
Maximaler Arbeitsbereich Maximum working area	170 cm
Gewicht (netto) Weight (net)	4,7 kg
Stativrohr, Edelstahl Stand post, stainless steel	ca. approx. 96 cm
Fußrohr, Edelstahl Feet, stainless steel	ca. approx. 30 cm

Ersatzlampe | Spare bulb

mit Sicherheits-/Glasschutzscheibe
und Halogen-Kaltlichtreflektor
Abstrahlungswinkel 8°

with safety-/ glass protection shield
and halogen cold light reflector
angle of reflection: 8°

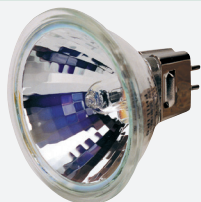

12 V / 35 W

REF 10.90100.002 (29252)



KaWe MASTERLIGHT® Classic LED

PRAXISLEUCHTEN MIT SCHWANENHALS | GOOSENECK EXAMINATION LIGHTS

KaWe MASTERLIGHT® Classic LED Praxisleuchte mit Schwanenhals | gooseneck examination light

Flexible LED-Praxisleuchte mit 5-Fuß-Fahrstativ aus hochwertigem Edelstahl | Flexible LED examination light with 5-foot, rolling floor stand made of high-quality stainless steel

- modernes, schlankes Design
 - punktgenaues Licht
 - angenehm und wunschgemäß verstellbar
 - Netzspannung 230 Volt
 - Lampe 12 V / 10 Watt (80% weniger Energie gegenüber 35 W)
 - Abstrahlungswinkel 24°
 - Farbtemperatur ca. 3000° Kelvin
 - einfache und schnelle Montage
 - mit wechselbarem Netzstecker
- modern, slim design
 - precise light spot
 - easy to use, freely adjustable
 - supply voltage: 230 Volt
 - lamp: 12 V/10 Watts (80% less energy compared to 35W)
 - reflection angle: 24°
 - colour temperature: approx. 3000° Kelvin
 - easy and quick assembly
 - with universal power plug



REF 10.11020.002

Technische Daten | Technical data

Leuchtfeldgröße (bei 0,5 m Arbeitsabstand) Light spot size (at a working distance of 0.5 m)	100 mm
Arbeitsbereich (bei 0,5 m Arbeitsabstand) Working area (at a working distance of 0.5 m)	125 mm
Beleuchtungsstärke (bei 0,4 m Arbeitsabstand) Illumination intensity (at a working distance of 0.4 m)	7.500 Lux
Lebensdauer der Lampe (im Vergleich zur Lebensdauer der Halogenlampe 1000 h) Lifespan of the light (compared with the lifespan of the 1000h halogen bulb)	22.000 h
Maximale Höhe Maximum height	211 cm
Maximaler Arbeitsbereich Maximum working area	170 cm
Gewicht (netto) Weight (net)	4,7 kg
Stativrohr, Edelstahl Stand post, stainless steel	ca. approx. 96 cm
Fußrohr, Edelstahl Foot, stainless steel	ca. approx. 30 cm

Ersatzlampe | Spare bulb LED


LED-Reflektorlampe
Abstrahlungswinkel 24°
LED reflector lamp
angle of reflection: 24°



12 V / 10 W

REF 10.90120.002

LED

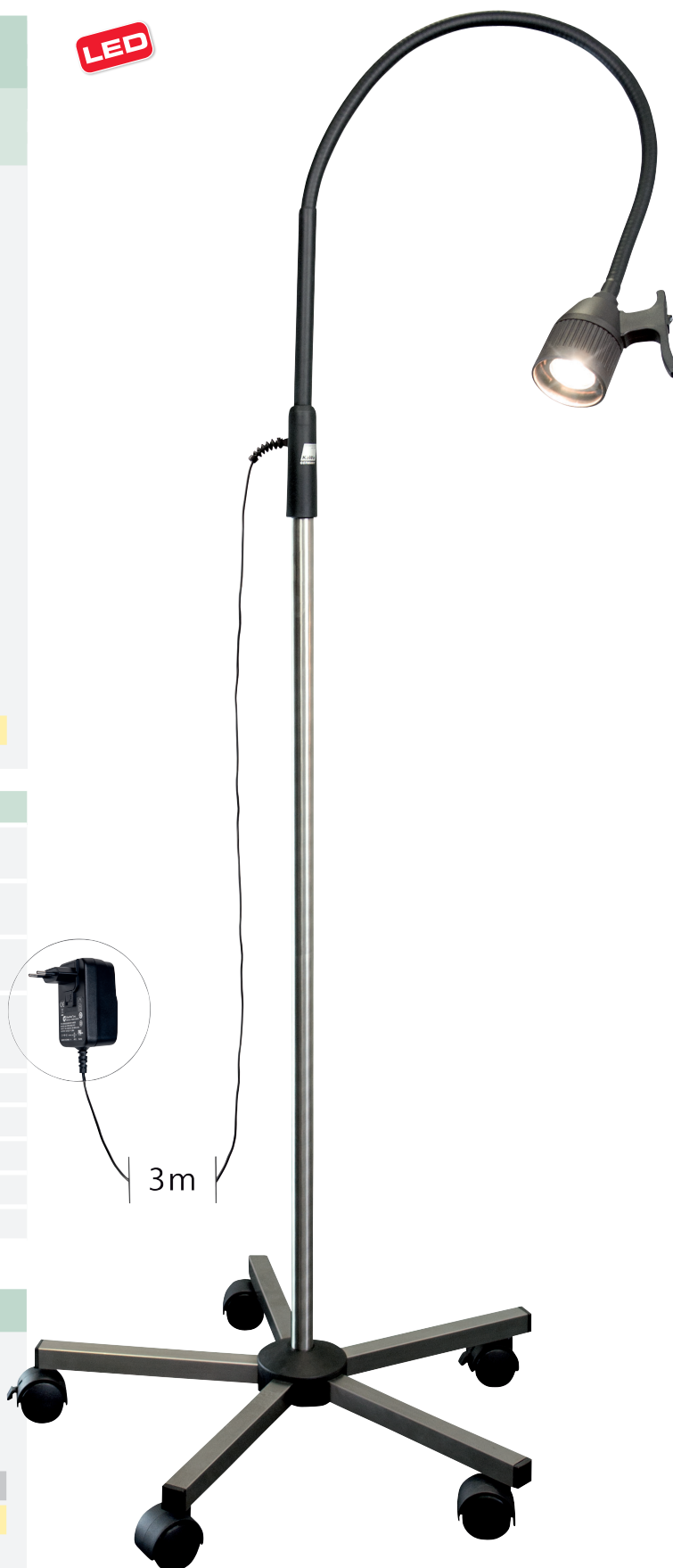

KaWe MASTERLIGHT® Classic

ZUBEHÖR FÜR PRAXISLEUCHE MIT SCHWANENHALS ACCESSORIES FOR GOOSENECK EXAMINATION LIGHT

KaWe MASTERLIGHT® Classic Praxisleuchte | Examination light

Oberteil allein, schwarz,
230 Volt, mit Schwanenhals
ohne Stativ

Upper part only, black,
230 Volt, with gooseneck
without stand



HL 12V / 35W

REF 10.12010.002

Oberteil, allein JEDOCH mit Stecker
mit 3 Rechteckstiften
Upper part only HOWEVER with
power plug, with 3 rectangular pins



240 V
GB
VERSION

HL 12V / 35W

REF 10.12011.002

Oberteil, allein, schwarz
mit Schwanenhals ohne Stativ
Upper part only, black,
with gooseneck, without stand

LED

LED 12V / 10W

REF 10.12020.002



230 V
EU
VERSION



240 V
GB
VERSION



110 V
US
VERSION

Wandhaltewinkel Wall bracket

zur Wandbefestigung
des Oberteils der
KaWe MASTERLIGHT® Classic
Praxisleuchte
used to affix the upper part
of the KaWe MASTERLIGHT®
Classic examination lamp to
the wall



REF 10.90201.001

Tischklemme Table clamp

zur Tischbefestigung des Ober-
teils der KaWe MASTERLIGHT®
Classic Praxisleuchte,
für Tische bis ca. 4 cm.
used to secure the upper part of
the KaWe MASTERLIGHT®
Classic examination lamp to
table tops with thicknesses of
up to 4 cm.



REF 10.90301.001

